



Dimensiones

unidad(mm)

■ CLESTA eIII -LÁMPARA EURUS-

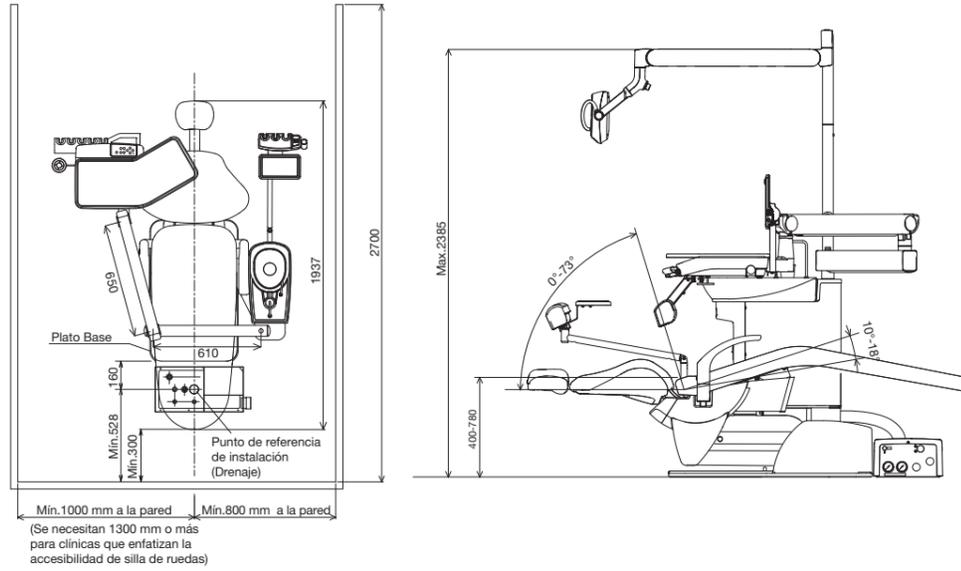

■ CLESTA eIII -LÁMPARA 300 LED-

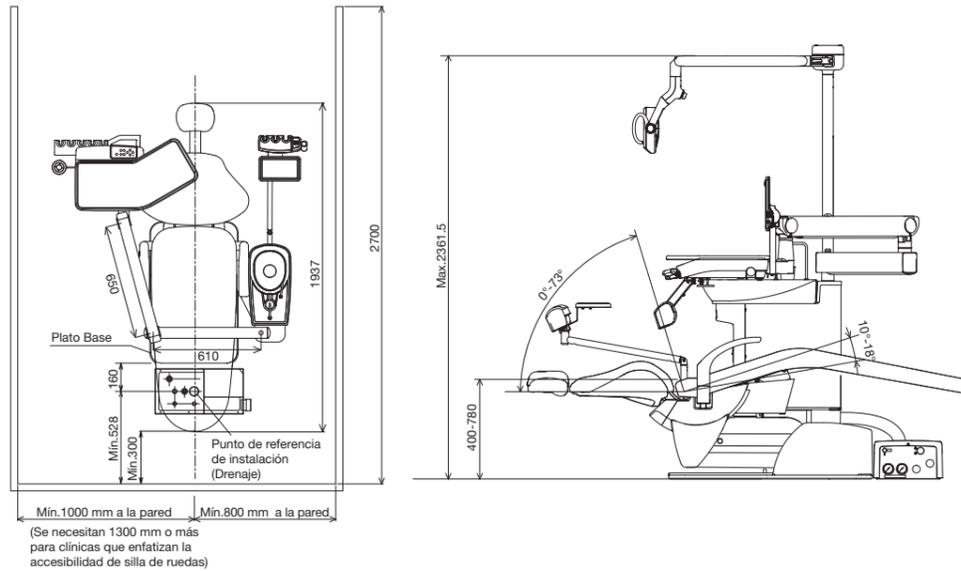

CLESTA eIII



CLESTA eIII

ofrece la comodidad de un tratamiento dental sin tensiones tanto para el dentista como para el paciente

Ergonomía

- Movimiento de inclinación suave a través de un sistema hidráulico
- Cojines ergonómicos

Facilidad de operación


- Consola de doctor movimientos suaves
- Soportes de piezas de mano de fácil acceso
- Minimiza el estrés durante su uso

Eficiencia

- Crea un ambiente ideal para la odontología tanto para dentistas como para pacientes




Variaciones

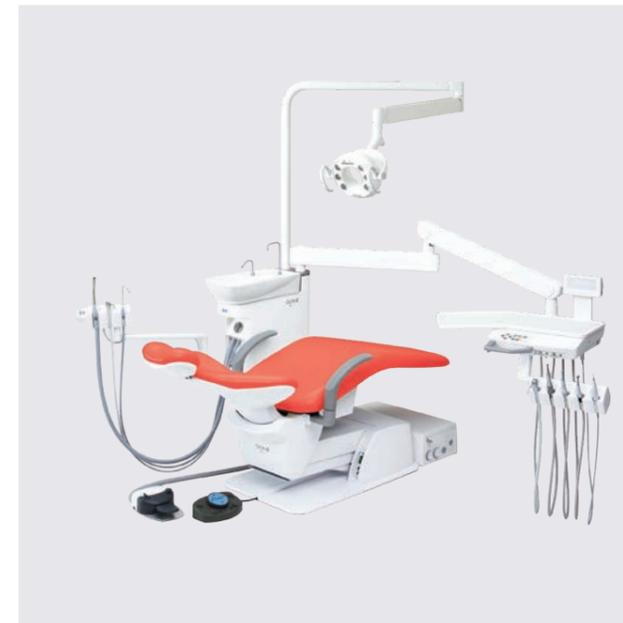

Tipo colgante



Tipo colibri

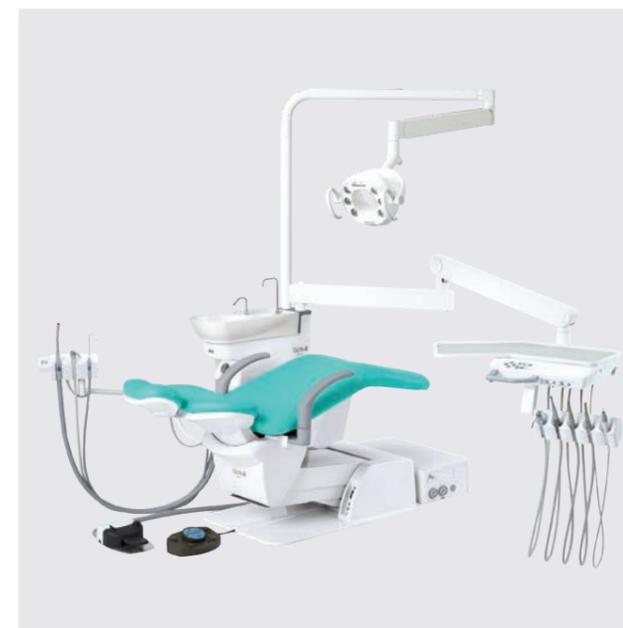


Tipo colgante (Sillón pediátrico)



Tipo carro mangueras colgantes

La combinación de un sistema electrohidráulico y neumático de operación garantiza un alto nivel de confiabilidad y seguridad.

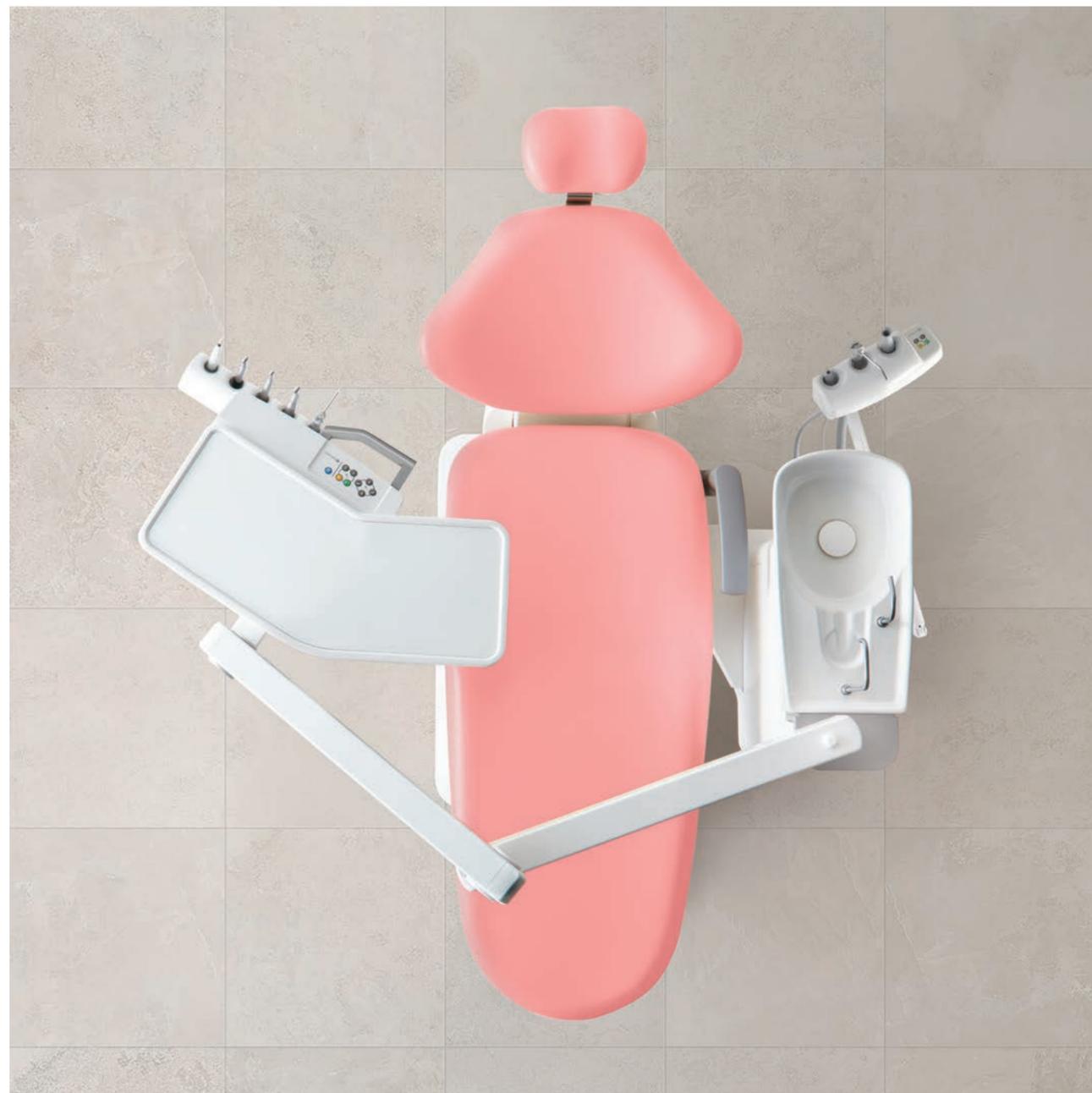

Unidad y Sillón

Escupidera

La escupidera de porcelana es de fácil limpieza y está diseñada para evitar derrames de agua al enjuagar.

Sillón

- Potente sistema hidráulico que permite una amplia gama de alturas de elevación.
- Cojín de el sillón de diseño ergonómico que garantiza la comodidad del paciente.

El respaldo reclinable está diseñado para evitar que el paciente se deslice.



Brazo flexible

Al emplear un sistema de freno neumático de seguridad, el brazo flexible mejora la movilidad y flexibilidad durante la práctica odontológica.

Bandeja de operador

Gran bandeja de operador para garantizar la facilidad de uso. Soporte de pieza de mano giratorio para facilitar la posición más adecuada para el dentista.

Lámpara



LÁMPARA EURUS

La Lámpara EURUS proporciona activación de sensor, intensidad continua entre 5,000 lx y 34,000 lx y reproduce la luz natural con un alto índice de reproducción cromática.

Iluminación flexible

El brazo de resorte Belmont permite que la luz se mueva y permanezca exactamente donde se desea, de modo que el dentista/asistente dental pueda comenzar el tratamiento con comodidad. El brazo cubre un espectro amplio, incluyendo las áreas maxilar y mandibular del paciente, para una iluminación adecuada.



LÁMPARA 300 LED

La lámpara 300 LED proporciona activación de sensor, intensidad continua entre 3,100 lx y 28,000 lx, rotación de tres ejes y campo iluminado con luz clara.

Opciones y Accesorios



Bandeja de lavado

El sistema de lavado de instrumentos permite limpiar fácilmente las líneas de agua de la pieza de mano. La bandeja de lavado es un adminículo adicional que permite el lavado con manos libres.

*La escupidera mostrada en la imagen no es para la unidad CLESTA eIII.



Brazos para monitor

Los brazos para monitor de pantalla plana se puede ajustar para adaptarse a las necesidades individuales. (no incluye el monitor)



Sistema de agua presurizada

El sistema de agua presurizada ofrece una selección de botellas de 750 ml o 2 litros y se puede integrar en la unidad para el suministro hídrico a la pieza de mano. La cubierta estética es una opción extra.



Control de pie

Se puede seleccionar un control de pie entre dos interruptores para regular el movimiento del sillón: (1) un interruptor de control manual para los movimientos hacia arriba, abajo, adelante y atrás, y (2) un interruptor de control de posición programada para 0, 1, 2 y última posición. La manija de control de pie está disponible como una opción.




Consola de asistente

La bandeja secundaria del asistente aumenta la eficiencia del trabajo de éste (la bandeja secundaria de metal no está incluida). Asimismo, el soporte de la lámpara de fotocurado mejora la operatividad de la misma. Las puntas HVE y la punta SE son opcionales.




Reposabrazos giratorio

Un reposabrazos giratorio en el lado derecho proporciona un buen apoyo para el usuario y, en el caso de pacientes de edad avanzada, permite subir y bajar del sillón con facilidad.

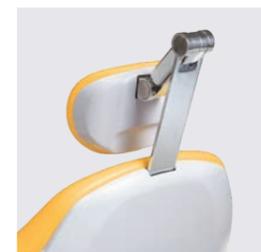

Reposacabezas de doble eje

Adecuado para niños y adultos, mejorado para ajustar fácilmente la posición del paciente.

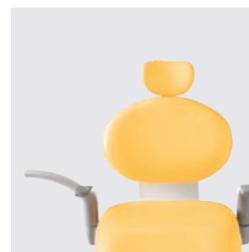

Sillón pediátrico

El CLESTA eIII PEDO tiene un respaldo más pequeño, un asiento más corto y una posición de escupidera más baja para acomodar a los niños pequeños. El apoyacabezas doble articulado está disponible como una opción.

● Estándar | ○ Seleccionable | - No disponible

Sillón	Estándar	Pedriático
Apoyacabezas articulado	●	●
Reposacabezas de doble eje	○	○
Reposabrazos solo en el lado izquierdo (fijo)	●	-
Reposabrazos en ambos lados, lado izquierdo fijo y lado derecho giratorio	○	●
Interruptor de pie de 8 vías (manual/automático)	●	●

Elemento de dentista	
Interruptor de membrana (sillón automática/manual, llenador de vaso)	●
Bandeja de operador grande con tapete de silicona	●
Bandeja de operador pequeña con tapete de silicona	○
Control de pie A3	●
Control de pie combinado	○
Jeringa triple	●
Manguera de cuatro orificios (tipo Midwest)	○
Micromotor eléctrico	○
Escarificador ultrasónico electrónico	○

Cuerpo de la Unidad	
Llenador de vaso y lavado de escupidera temporizados	●
Llenador de vaso por sensor y lavado de escupidera	○
Calentador de agua	○
Sistema de agua presurizada	○
Separador	○
Sistema de lavado	○
Caja de conexión separada	●
Salida del servicio de agua	○
Salida del servicio de aire	○

Elemento de asistente	
Brazo asistente tipo estándar	●
Jeringa triple	●

Lámpara	
LÁMPARA EURUS	○
LÁMPARA 300 LED	○

Opciones de color de tapicería

Los colores vienen en cuatro temas: Warm, Cool, Earth y Vitamin. Cualquier elección de estos colores para el cuero debe coincidir con la decoración interior de su clínica.

Warm Color						
Cool Color						
Earth Color						
Vitamin Color						