


Dimensiones

tamaño (mm)

■ CLESTA eIII SWING

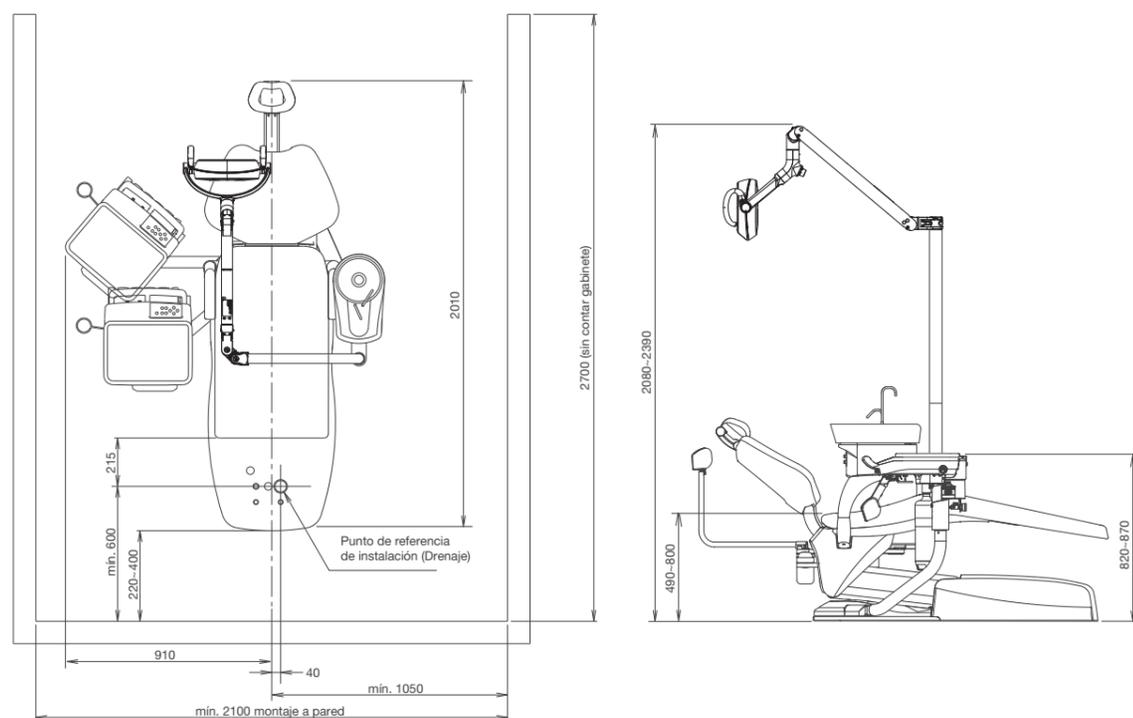

CLESTA eIII SWING



CLESTA eIII SWING

Básica, ligera y flexible

Básica

- Fácil de cambiar de uso diestro a zurdo
- Soportes para piezas de mano de fácil acceso
- Espacio compacto
- Suave movimiento basculante por sistema hidráulico
- Cojines ergonómicos

Ligera

- La bandeja de instrumental montada en la base se puede mover de forma ligera y suave.
- Reduce la fatiga de brazos de dentistas y asistentes, lo que permite prolongar la vida laboral.
- Posición de ajuste con movimiento preciso gracias al reposacabezas ligero

Flexible

- Brinda un espacio de operación cómodo
- Proporciona una variedad de estilos de operación y zonas de preparación a gusto



Ligera como el aire

La bandeja de instrumental es simple y práctica de usar. Se puede mover fácilmente. Dentistas y asistentes de menor estatura pueden mover la bandeja de instrumental sin estirar los brazos. Esta característica reduce la fatiga y permite prolongar su vida laboral.



Solo debe balancearlo para uso diestro o zurdo. Dele un "SWING"

El cambio ambidiestro es sencillo y toma solo unos minutos.


Dentistas y asistentes pueden colocar la bandeja de instrumental y la consola de asistente como deseen.



Suave y relajada

El mecanismo hidráulico garantiza movimientos suaves y silenciosos de las articulaciones y brinda una sensación de comodidad a los pacientes. El nuevo sistema de reposacabezas de doble eje ofrece una amplia gama de ajustes y puede adaptarse con precisión en incrementos de 7,5 grados, acomodando a pacientes, tanto niños como adultos.

El sillón tiene una altura inicial baja con una capacidad de carga de 200 kg.

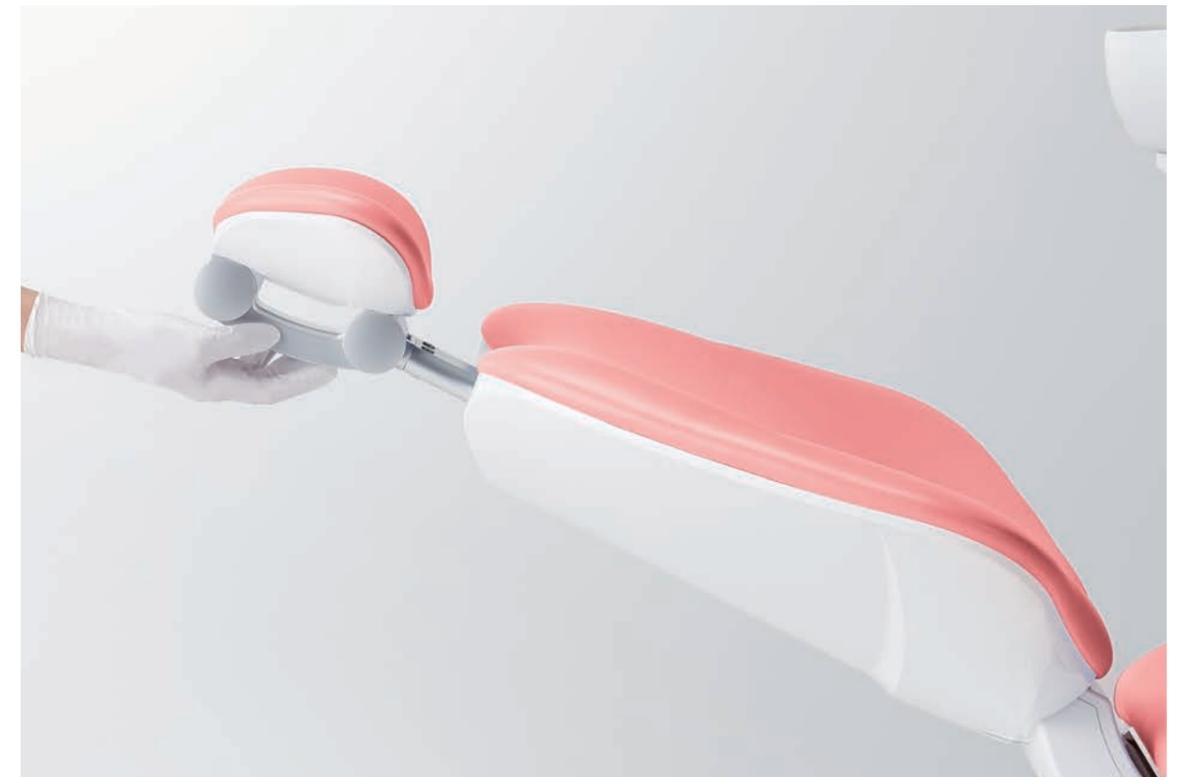

Ajuste su posición

La bandeja de instrumental se puede ajustar en tres niveles de altura, y cada dentista puede colocarla adecuadamente.



Reposabrazos giratorios

Los reposabrazos están diseñados con una longitud y forma que facilitan el agarre para los pacientes, y el mecanismo de rotación lateral ayuda a los pacientes ancianos a subir y bajar de la silla con facilidad.

Lámpara dental



LUZ EURUS LIGHT

La luz EURUS LIGHT ofrece activación por sensor, intensidad continua entre 5.000 lx y 34.000 lux, e imita la luz natural con una alta capacidad de reproducción cromática funcional.



Componentes de la lámpara desmontable

La cubierta de la lente y el mango de luz autoclavable se pueden quitar con una sola palanca para facilitar la limpieza.

Especificaciones

● Estándar | ○ Seleccionable

Sillón	
Reposacabezas de doble eje	●
Reposabrazos giratorio a ambos lados	●
Interruptor de pedal de 8 modos (manual/automático)	●
Elemento del odontólogo	
Turbina de aire/motor de aire para manguera de turbina de 4 vías Midwest	○
Turbina de aire/motor de aire para manguera de turbina de 4 vías Midwest con fibra óptica	○
Micromotor eléctrico	○
ZEG	○
Jeringa triple	●
Interruptor de membrana (sillón automático/manual, llenador de vasos)	●
Mesa del operador de tamaño pequeño con tapete de silicona	●
Controlador de pedal	●
Controlador de pedal con interruptor de sillón	○
Sistema de agua limpia	○
Visor de películas de tamaño dental	○

Consola de asistente	
Evacuador de alto volumen y extractor de saliva manual	●
Jeringa triple	○
Salivera	
Llenador de vasos y limpieza de receptáculo temporizados por aire	●
Calentador de agua	○
Soporte de monitor	○
Salida de servicio de agua	○
Salida de servicio de aire	○
Lámpara	
LUZ EURUS LIGHT	●

Opciones de color del tapiz

Los colores vienen en cuatro paletas: cálido, frío, tierra y vitamina. Cualquier elección de estos colores de cuero debe coincidir con los detalles interiores de su clínica.

[Sin costuras]

Colores cálidos	 Rosa Coral/ES20	 Rosa claro/ES30	 Beige/ES21	 Camello/ES14	 Burdeos/ES12	 Negro/ES8
Colores fríos	 Azul menta/ES5	 Azul indigo/ES25	 Azul Claro/ES16	 Púrpura/ES26	 Gris claro/ES33	 Gris turquesa/ES28
Colores tierra	 Rosa/ES34	 Malva/ES27	 Bosque/ES31	 Azul Aldo/ES23	 Gris Ceniza/ES32	 Chocolate/ES11
Colores vitamina	 Rojo Escarlata/ES24	 Naranja mandarina/ES22	 Amarillo limón/ES2	 Amarillo Verde/ES18	 Azul cielo/ES7	 Azul/ES29

[Luxury]

 Negro/SH1	 Azul oscuro/SH9	 Granate/SH7	 Verde Inglaterra/SH18	 Naranja/SH22	 Camello/SH10
 Ocre/SH6	 Marfil/SH15				

