

E U R U S S 8



<https://dental.takarabelmont.co.jp/>



Nombres de componentes
Dental Unit & Chair : EURUS S8
Dental Light : EURUS LIGHT
: 900 DENTAL LIGHT TYPE 920

TAKARA BELMONT CORPORATION 2-1-1,HIGASHISHINSAIBASHI,CHUO-KU,OSAKA,542-0083,JAPAN +81-6-6213-5945

La especificación y los colores están sujetos a cambios sin previo aviso.

REF D-165 2308 GBTS





E U R U S

Con un nombre inspirado en el Viento del Este, que trajo la lluvia bendita a los campos de cereales en la mitología griega antigua, Eurus encarna nuestra creencia de traer productos altamente innovadores y confiables al mundo de la odontología.

ESPACIO COMPACTO

Amplia variedad de estilos de tratamiento

La unidad dental ambidiestra es ideal para dentistas y asistentes diestros y zurdos. El cambio es fácil y toma solo unos minutos. Esta función hace que la unidad sea adecuada para una variedad de estilos operativos y aumenta la eficiencia. Por ejemplo, la bandeja del soporte del asistente giratorio ofrece a los dentistas un espacio de operación más cómodo y permite operaciones con dos manos. La colocación de la mesa del médico detrás de la silla permite a los asistentes prepararse durante las consultas.



Posición a dos manos

El largo alcance y el ligero movimiento del brazo facilitan que el tratamiento con las dos manos se administre sin estrés.



Posición de cuatro manos

En posición a cuatro manos, el odontólogo y el asistente disponen de espacio suficiente para facilitar un tratamiento fluido.

LIGERA COMO EL AIRE

Una mesa de médico altamente maniobrable y liviana reduce la fatiga de los dentistas. Permite mover la mesa del médico con un mínimo esfuerzo. Esta característica puede conducir a una prolongación de la carrera de un dentista. La mesa del doctor y la escupidera se pueden mover en un amplio rango de izquierda a derecha. Belmont tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo de esta amplia gama de especificaciones de movimiento.





SUAVE, CÓMODO Y RELAJANTE

Sillón

El mecanismo hidráulico avanzado del sillón garantiza un movimiento suave, silencioso y eficiente de todas las funciones del sillón. Esto permite maniobrar al paciente sin esfuerzo hasta la posición más cómoda para recibir su tratamiento. Adaptándose a la edad, altura y estatura únicas de cada paciente, desde niños pequeños hasta adultos, la posición del nuevo sistema de reposacabezas de doble eje se puede ajustar en incrementos de 7,5 grados para obtener lo último en precisión y comodidad. Con nuevos avances en la maniobrabilidad, el reposacabezas también puede ser ajustado en altura sin esfuerzo por el dentista y el asistente para garantizar una comodidad total para el paciente. La silla tiene una altura inicial baja con una capacidad de carga de 200 kg.



Reposabrazos abatible
Los reposabrazos están diseñados con una longitud y forma que facilitan la sujeción de los pacientes y el mecanismo de rotación lateral ayuda a los pacientes de edad avanzada a subir y bajar del sillón con facilidad.



Controlador de pie inalámbrico con interruptor de palanca de silla Opción
El sillón dental se puede manipular completamente de manera higiénica, intuitiva y con manos libres mediante el uso del pie del operador.



Cabezal electrónico Opción
El recorrido completo de 120 mm y el ángulo del cuello se pueden ajustar fácilmente sin imponer una tensión excesiva al paciente. El reposacabezas motorizado también se puede maniobrar con las manos libres a través de los interruptores de pie, lo que garantiza una total higiene y seguridad.

AJUSTAR LA ALTURA

Soporte de brazo

El rango de movimiento vertical de la mesa es de 840, 865 y 890 mm, ajustable en altura en tres etapas.



Manija - ideal para la operación del panel táctil

El mango no solo está diseñado para un movimiento fácil de sujetar y mover, sino que también proporciona una posición de descanso ideal para la mano. Esto reduce el estrés y la fatiga, y facilita el funcionamiento fiable del panel táctil.



Posición del portainstrumentos

Diseñado para ser independiente de la mesa, el portainstrumentos se puede ajustar libremente a través de un mecanismo de ajuste de tres ejes para lograr la mejor posición de trabajo para el dentista.



Guía de manguera

El movimiento suave y sin fricción del rodillo libera al dentista y al asistente dental del peso de la manguera al sacar los instrumentos dentales.



De largo alcance

El largo alcance de 900 mm permite que el dentista y el asistente dental traten a los pacientes fácilmente desde la posición del pecho, así como desde la posición lateral del sillón dental.

TU ESTILO AL TOQUE DE UN DEDO

Interfaz

Diseñada para mejorar la eficiencia y reducir el estrés durante los tratamientos, la pantalla solo muestra la información necesaria cuando se selecciona y recoge una pieza de mano. Esto permite que el dentista se concentre en el tratamiento en cuestión y en el paciente, sin distracciones innecesarias.



Motor

La configuración de la pantalla para los motores de las piezas de mano, que es capaz de almacenar cuatro configuraciones diferentes, permite una operación intuitiva y sin problemas. Las RPM, el torque y la dirección de rotación también se pueden seleccionar con un solo toque en la pantalla.



Escarificador

Desde la pantalla de configuración de la pieza de mano, los modos de tratamiento, es decir, periodontal, endodoncia y escarificación, se pueden seleccionar y almacenar con un solo toque en la pantalla.



Operación lateral

Un nuevo controlador de pie deslizante permite un ajuste de precisión a través de movimientos de posición lateral y activación de paso. Las RPM máximas se pueden configurar para la pieza de mano de forma rápida e intuitiva.

OFRECIENDO CALIDAD

Escupidera

La escupidera se ha ampliado para ofrecer una mayor capacidad y un acceso más fácil que, con el separador, garantiza que se mantengan los más altos niveles de higiene.



Indicador LED **Opción**

La unidad cuenta con un indicador de seguridad que muestra el estado de bloqueo del sillón dental y las piezas de mano de una manera fácil de ver. Esto asegura que el dentista y el asistente dental entiendan rápida y fácilmente el estado de la unidad.

Sistema de succión

La unidad proporciona una succión efectiva y confiable que se ha incrementado significativamente en un 185 %. Este sistema también se puede adaptar para succión doble, lo que resulta útil para procedimientos quirúrgicos más intensivos.

*Comparison of our conventional products under our conditions.

RENDIMIENTO DE LIMPIEZA MEJORADO

Limpieza

La higiene en el interior del sillón se mantiene mediante el lavado de la línea de agua, lo que significa que se pueden administrar tratamientos cómodos para el paciente con total seguridad y confianza. Como opción amigable con el medio ambiente, la unidad viene con un separador, o un separador con colector de amalgama, para reducir la necesidad del mantenimiento diario.




Soporte esterilizable en autoclave **Opción**

Las salidas del odontólogo y las salidas del asistente pueden esterilizarse en autoclave y separarse para su limpieza.

Sistema de limpieza de línea de succión **Opción**

El uso diario del sistema integrado de limpieza por succión evita la acumulación de residuos en la línea de succión y ayuda a mantener una succión constante.

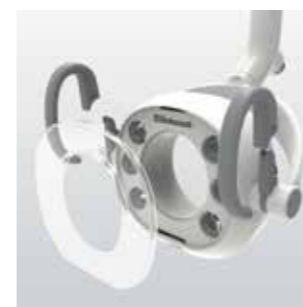

Componentes de luz desmontables **Opción**

La cubierta del lente y los mangos de luz esterilizables en autoclave se quitan sin esfuerzo con una sola palanca para facilitar la limpieza.

Sistema de lavado **Opción**

El sistema de lavado de la pieza de mano inhibe la acumulación de biopelículas y el crecimiento bacteriano en las mangueras de las piezas de mano.

Botella de agua **Opción**

Se puede acceder fácilmente al agua limpia para las piezas de mano y el llenador de vasos a través de una botella de agua que está convenientemente ubicada y asegurada inmediatamente debajo de la mesa del médico.

BRILLANTE Y SUAVE

Dispositivo de iluminación

Nuestras luminarias están diseñadas para reproducir la luz natural con una alta capacidad de reproducción cromática funcional. El modo compuesto de la luz puede estar activo y la luz se puede encender y apagar a través de su sensor sin contacto.



LUZ LED 900

La salida de luz se puede ajustar entre 4.000 lx y 35.500 lx.



LÁMPARA EURUS

Este dispositivo de iluminación LED de próxima generación, que cumple con la norma ISO9680, es capaz de emitir luz con una intensidad variable de 5000 lx a 34 000 lx.



Iluminación flexible


















El brazo de resorte Belmont permite que la luz se mueva sin esfuerzo y permanezca en la posición deseada, para que el dentista o el asistente dental puedan comenzar los tratamientos sin demora. El brazo abarca un área amplia, incluidas las áreas maxilar y mandibular del paciente, para garantizar una iluminación óptima para cada procedimiento dental.

VARIACIONES DE COLOR









Coordinación de colores

El color de la tapicería puede coordinarse para adaptarse a los aspectos interiores y al diseño de su clínica dental a partir de cuatro temas: Cálido, Frío, Tierra y Vitamina; y de tres estilos de tapicería: sin costuras, con costura y de lujo.

[Con y sin costuras]

Warm Colour						
	Coral Pink / ES20	Light Pink / ES30	Beige / ES21	Camel / ES14	Bordeaux / ES12	Black / ES8
Cool Colour						
	Mint Blue / ES5	Indigo Blue / ES25	Light Blue / ES16	Purple / ES26	Light Gray / ES33	Gray Teal / ES28
Earth Colour						
	Rose / ES34	Mauve / ES27	Forest / ES31	Aldo Blue / ES23	Ash Gray / ES32	Chocolate / ES11
Vitamin Colour						
	Scarlet Red / ES24	Mandarin Orange / ES22	Lemon Yellow / ES2	Yellow Green / ES18	Sky Blue / ES7	Blue / ES29

[Luxury]

					
Black / SH1	Dark Blue / SH9	Maroon / SH7	England Green / SH18	Orange / SH22	Camel / SH10
					
Mustard Yellow / SH6	Ivory / SH15				

E U R U S

Seleccione la unidad Eurus que mejor se adapte a las necesidades específicas de su clínica y sus pacientes entre una amplia gama de opciones.

Variaciones

Conceptualizada por Belmont para capturar esencias de limpieza, ternura y ergonomía suprema, la serie Eurus presenta una amplia gama de taburetes, sillones dentales y mesas de dentista para adaptarse a los requisitos individuales de usted y su equipo dental, así como también de los pacientes.

Con una herencia orgullosa y distinguida en la industria dental, Belmont se enorgullece de crear productos innovadores que se conciben a través de una comprensión profunda de los requisitos profesionales y de tratamiento de los dentistas y asistentes dentales, y las expectativas de sus pacientes. Nuestra apreciación de las demandas técnicas y los procedimientos dentales establecidos y emergentes, y la ansiedad experimentada por muchos pacientes, también se reflejan y son inherentes a cada concepto de equipo para hacer que la entrega de tratamientos y la visita al dentista sean lo más placenteros y cómodos posible.



S8 Estándar

- [Sillón]
Silla de contorno
- [Tipo de montaje]
Escupidera de rotación y mesa de Dr. de montaje en base (Colgante/En lugar)
- Escupidera de rotación y carro (Colgante/En lugar)
- Escupidera de rotación y mesa de Dr. de montaje oscilante (Continental•colibri)
- [Lámpara]
Montaje de la unidad Luz LED



S8 VacPac

- [Sillón]
Silla de contorno
- [Tipo de montaje]
VacPac y montaje en base Dr. Table (Colgante/En lugar)
- VacPac y carro (Colgante/En lugar)
- Mesa Dr. VacPac y de montaje oscilante (Continental•colibri)
- [Lámpara]
Montaje de la unidad Luz LED



S8 sin escupidera

- [Sillón]
Silla de contorno
- [Tipo de montaje]
Mesa Dr. de montaje base (Holder/Place)
- Carro (Colgante/En lugar)
- Mesa de Dr. de montaje oscilante (Continental•colibri)
- [Lámpara]
Montaje de la unidad Luz LED

